


**HLA ROTOR PARA LAVADOR DE LINFOCITOS  
VELOCIDAD MAXIMA: 2000 X G  
ROTOR: HLA (0.25 A 1 ML X 12 POSICIONES)**

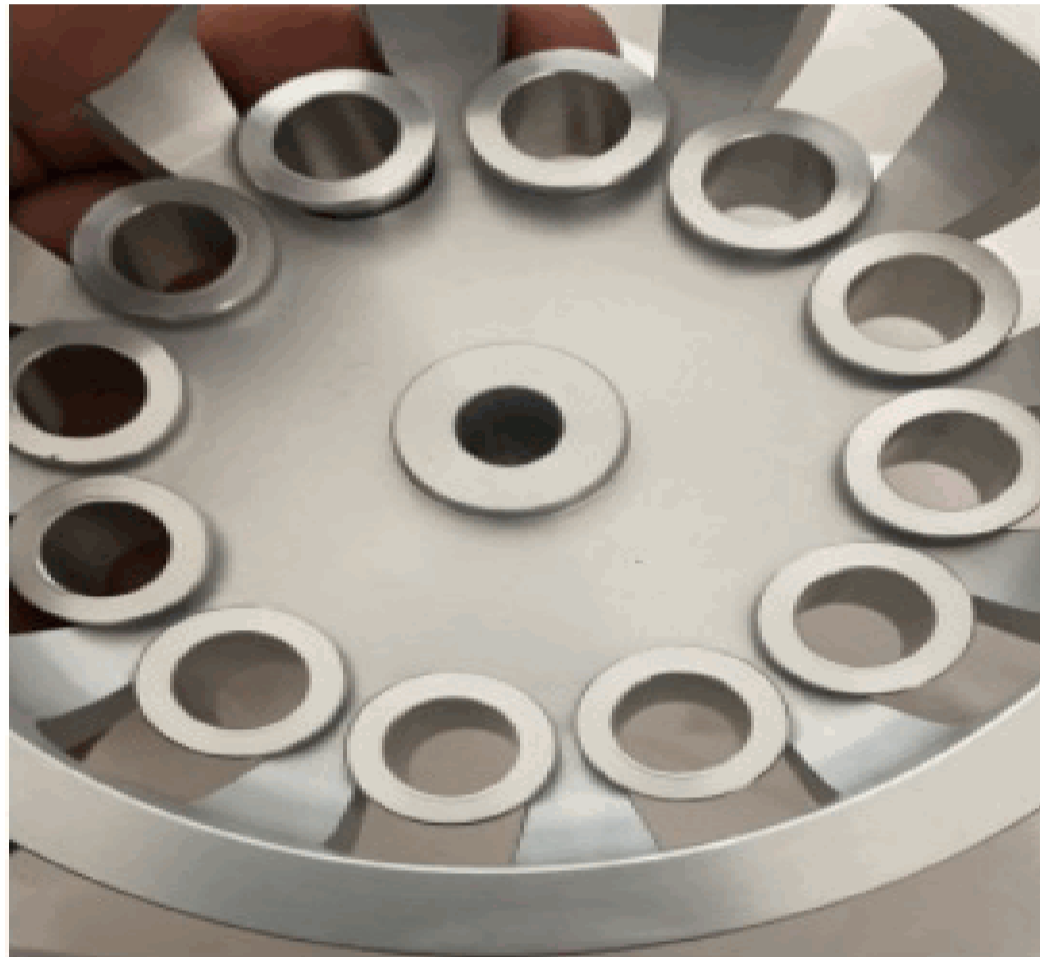

## Rotors

Rotor	Key	R FC	C Tiempo de centrifugación	Use
Rotor HLA para lavado de linfocitos	1	2000 × g	180 s	Separación de linfocitos separación celular incubada
	2	1000 × g	3s	Último exenterato de hematob (eliminación de trombina)
	3	1000 × g	60s	Lavado de linfocitos
Rotor SERO para lavado de eritrocitos	1	500 × g	60s	Agrupación de sangre, imagen de reacción de hemaglutinación
	2	1000 × g	15s	Emparejamiento cruzado, y la prueba de antistaphyloysin
	3	1000 × g	60s	Lavado de hematocitos, extracción de suero y plasma.