


AeHealth



**Analizador Hematológico 3 Diff-60 Test/Hora
21 Parámetros + 3 Histogramas
Modelo: AERC-3**

CARACTERÍSTICAS

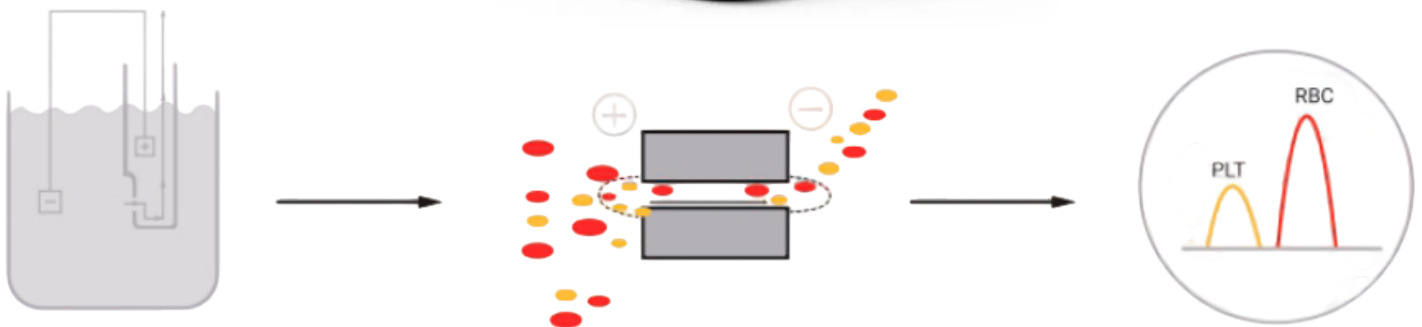

El analizador automático de hematología AerC-3 es un instrumento de diagnóstico clínico con numerosas funciones y fácil operación. Puede proporcionar 21 parámetros y 3 histogramas, conteo de doble canal. Limpieza automática de coágulos y recuento automático que garantizan resultados precisos y estables. Ampliamente utilizado en laboratorios


VENTAJAS

Parámetros avanzados

Parámetros avanzados


21 Parámetros y 3 Histogramas.

Se puede configurar las unidades de los parámetros.

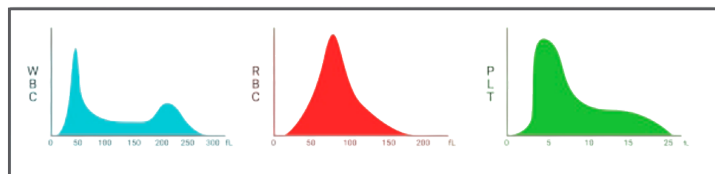

Limpieza de coágulos


Monitorea en tiempo real el sistema de fluidos. Lava, remoja y quema a alta presión las tuberías para asegurar que no existe bloqueo en el conteo ni en las cámaras.

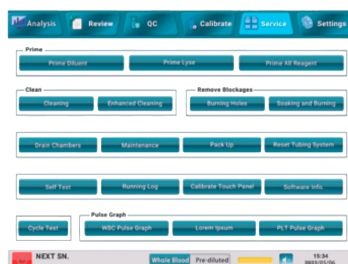

Alta precisión


Recuento de doble canal, sin contaminación cruzada entre canales y baja tasa de arrastre.

Ajuste automático de voltaje del blanco HGB, ajuste automático de umbrales de alarma de obstrucción y burbuja en las aperturas de conteo.

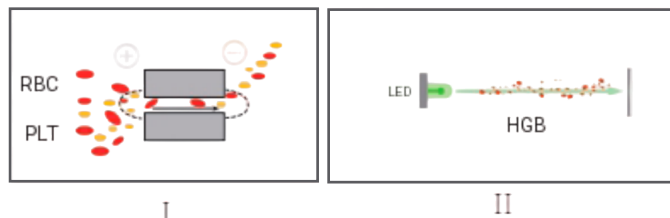


Recuento automático

Recuento automático después del tratamiento de desobstrucción mientras un orificio de conteo está obstruido, el analizador evita volver a contar la sangre.

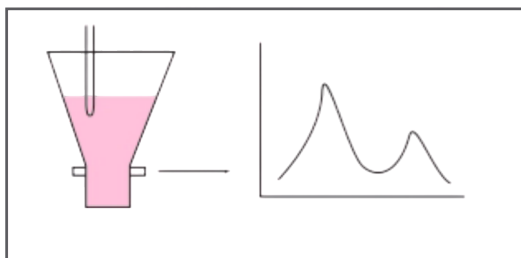

Alarma de histograma anormal

Si el histograma del resultado del análisis de la muestra es anormal. La máquina generará automáticamente una alarma de histograma. R1,R2,R3, R4, Rm, Pm según el tipo de excepción.

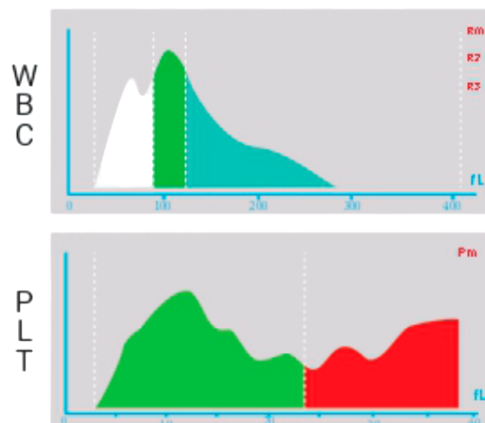

Reactivos y espacio de trabajo

2 reactivos: Diluyente y Lisante.

Bajo consumo de reactivos.

El Lisante se instala dentro del analizador, para mejor utilización del espacio.



Diseño con seguridad






Separación de circuitos y líquidos, para asegurar la protección.

Diseño del analizador bien distribuido para un mantenimiento conveniente.



CORRELACIÓN

Resultado de comparación con la marca Sysmex

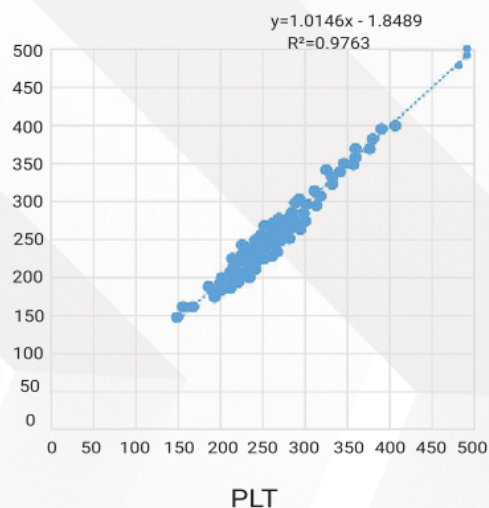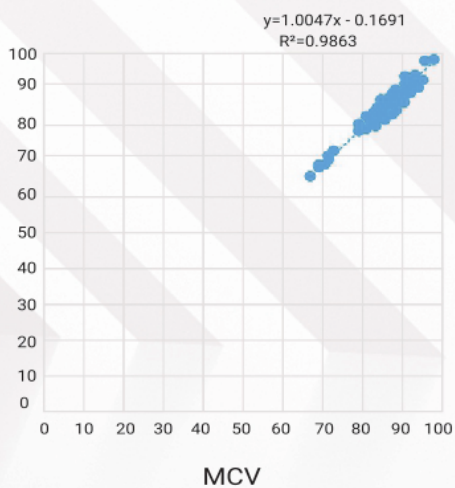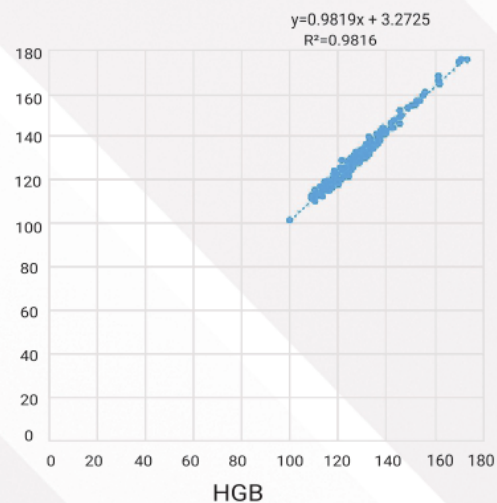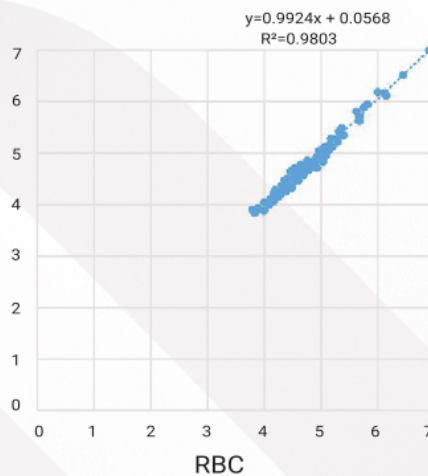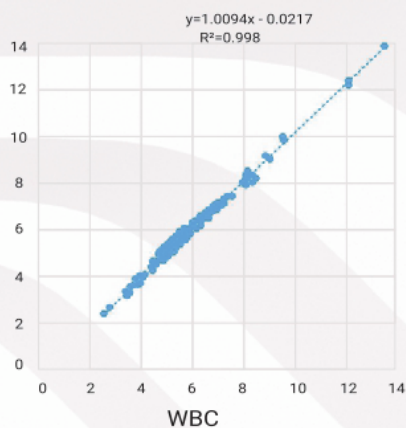

Reactivo de trabajo

- Diluyente 20 L
- Lisante 500 mL

Reactivo de mantenimiento

- Probe Cleanser 50 mL

