


BIOBASE

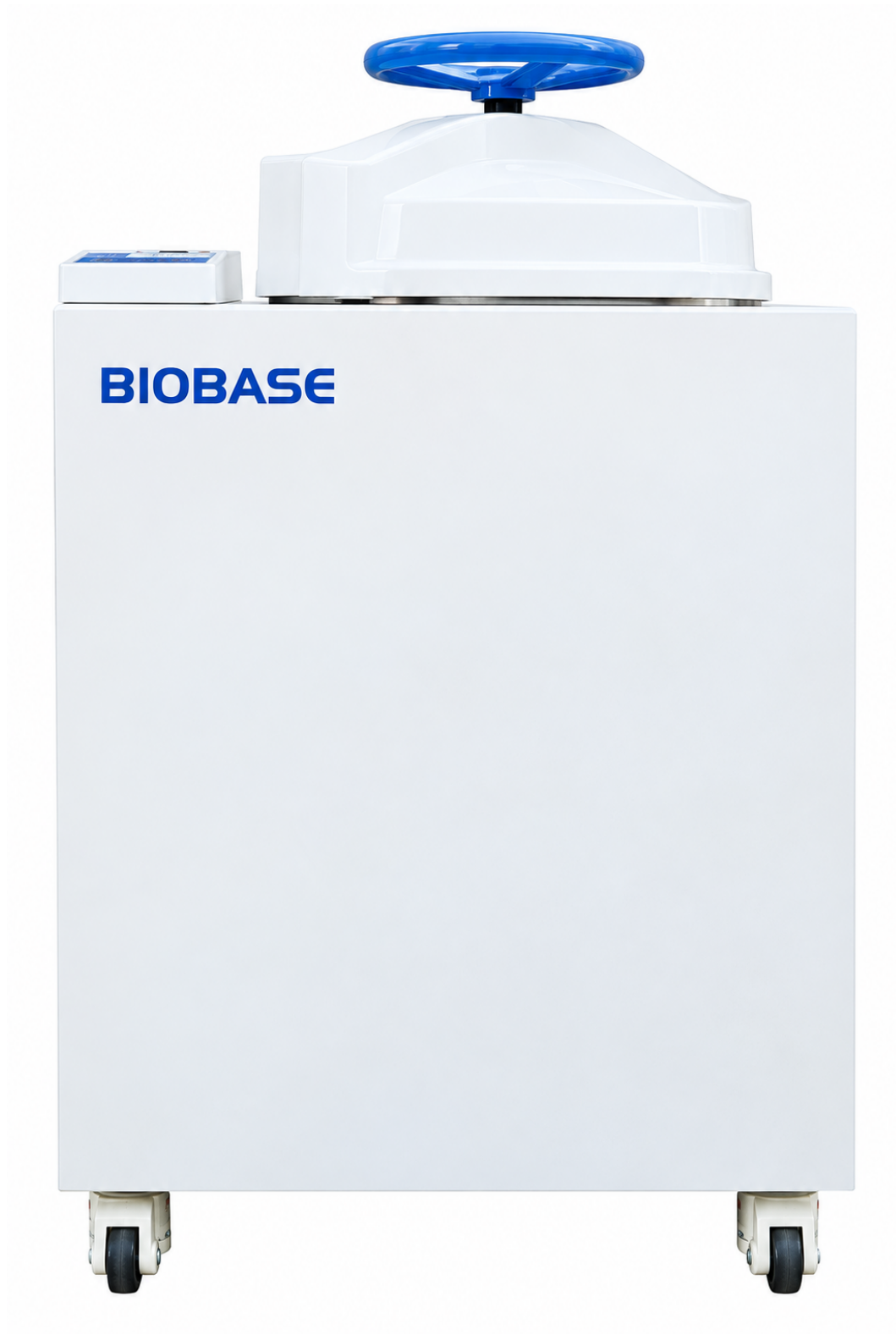

**Autoclave 75 Litros
Vertical Digital
Modelo: BKQ-B75II**

DESCRIPCIÓN:

Este autoclave digital microprocesado utiliza control PID y un sistema de vacío de purga, ofreciendo ciclos automatizados de precalentamiento y secado. Su cámara es de Acero Inoxidable AISI 304, y cuenta con múltiples sistemas de seguridad que incluyen llenado automático, control de sobrecalentamiento, bloqueo de puerta y apagado por bajo nivel de agua, asegurando un proceso eficiente y seguro para el operador.

ESPECIFICACIONES:

- Filtro de entrada de agua para mantener la alta calidad del agua.
- Impresora opcional.
- La pantalla LED muestra el procedimiento y los códigos de error.
- Ventana de acceso rápido independiente, de fácil reparación y mantenimiento.
- Selector automático de escape rápido o bajo para evitar el desbordamiento del líquido de esterilización
- Programas de esterilización para ropa, equipos, caucho, medio de cultivo, residuos, etc.
- Puerta tipo volante con anillo de sellado de operación fácil y segura.
- El proceso completo de llenado de agua, extracción dinámica de impulsos, calentamiento, esterilización, drenaje y secado funcionan automáticamente.
- Tanque de agua interno de acero inoxidable.
- La dosis de vapor no se descarga durante la esterilización, para mantener el exterior limpio y seco.



PARÁMETROS TÉCNICOS:

Modelo	BKQ-B50	BKQ-B75	BKQ-B100	BKQ-B120	BKQ-B150	BKQ-200
Tamaño externo (an x pr x al) mm	640x550x970	640x550x1070	640x550x1270	640x550x1370	650x650x1400	650x650x1700
Tamaño interno (an x pr x al) mm	750x745x1100	750x745x1240	750x745x1450	750x745x1540	800x760x1530	800x760x1720
Capacidad	50L	75L	100L	120L	150L	200L
Tamaño de cámara	φ386 * 500	φ386 * 682	φ386 * 875	φ386 * 1055	φ500 * 760	φ500 * 1000
Material de cámara	Acero inoxidable médico 304					
Presión máxima	0.28Mpa					
Temperatura máxima	150°C					
Presión de trabajo	0.175MPa				0.217MPa	
Temperatura de trabajo	105 - 136°C				50 - 134°C	
Presición de trabajo	± 0.1 °C					
Rango de tiempo	0 - 999 min					
Tiempo de escape de pulso dinámico	0 - 9 veces					
Temperatura de escape de pulso dinámico	105 - 134 °C					
Rango de temperatura de disolución	60 - 100 °C					
Rango de mantenimiento de temperatura	40 - 60 °C					
Consumo	4.4 KW	4.7 KW	5.2 KW	5.2 KW	5.2 KW	6 KW
Alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz			380V, 50Hz/200V, 50/60Hz		
Canastas	1	2	2	3	3	4
Peso	102	112	125	140	213	238

